



Programmi per l'uso estetico - benessere

CE

IT

HSD



Programmi Estetici-Benessere

PROGRAMMA PATOLOGIA
PROGRAMMI TERAPEUTICI

01 ACNE
 02 ACUFENI
 04 ANTIRUGHE
 07 ASMA BRONCHIALE
 10 AZIONE ANTIAGE
 13 BRONCHITE
 14 CEFALEA
 15 CELLULITE ARTI SUPERIORI
 17 COLITI
 19 DERMATITI
 26 DOLORI MESTRUALI
 30 EDEMA POSTFLEBITICO
 31 EDEMA TIBIALE
 32 EMATOMI
 33 ENFISEMA POLMONARE
 35 FARINGITE
 36 FISTOLE
 37 FLEBITI
 38 FORMICOLIO
 39 FOTODERMITI
 42 FIBROMIALGIA
 43 GASTRITI
 44 GENGIVITI
 45 GONARTROSI
 47 HERPES SIMPLEX
 48 HERPES ZOSTER
 (FUOCO DI SANT'ANTONIO)
 49 IMPOTENZA
 50 IPOTENSIONE
 52 LACERAZIONI DELLA PELLE
 53 LARINGITE
 54 LINFANGITE
 55 LINFEDEMA

PROGRAMMA PATOLOGIA

56 LINFEDEMA POSTMASTEC
 57 LOMBOSCIATALGIA
 60 MORBO DI RAYNAUD
 61 NEURALGIA AL COCCIGE
 62 NEVRALGIE
 63 NEVRITE
 65 OTITE
 66 PERIATRITE SCAPOLOMERALE
 67 PIAGHE
 68 POLIATRITE REUMATOIDE
 69 POSTUMI DA RASCHIAMENTO
 70 PROGRAMMA UNIVERSALE
 71 PROSTATITE
 72 PROSTATO - CISTITE
 73 PSORIASI
 75 RIGEN. TESSUTI CUTANEI
 76 RINITI
 79 SINUSITI
 80 SMAGLIATURE
 85 TONSILLITI
 87 TRACHEO - BRONCHITE
 88 TRAUMA ORECCHIO
 89 ULCERA DA DECUBITO
 90 ULCERA DUODENALE
 91 ULCERA GASTRICA
 92 VENE VARICOSE

PROGRAMMI ESTETICI

93 CELLULITE
 94 LIPORIDUCENTE
 95 LINFODRENAGGIO
 96 TONIFICANTE

PROGRAMMI LIBERI

DA 97 A 106

Per la programmazione dei programmi liberi vedi a pagina 15 del manuale terapeutico

 INFORMAZIONI

Per una maggiore efficacia di trattamento alternare sedute con diffusori/accessori LF a quelle con diffusori/accessori HF. La durata di tutti i programmi è di 45 minuti, mentre solo il programma "universale" n. 70 non ha un tempo predefinito; il trattamento si interrompe con lo spegnimento dell'apparecchio.

• PROGRAMMI


ACNE	
INTENSITÀ MAGNETICA LF	24 - 27 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 - 77 Hz
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 Hz
PROGRAMMA	01

Per ridurre le alterazioni della pelle con pustole dovute a infiammazioni dei bulbi piliferi.




ACUFENI	
INTENSITÀ MAGNETICA LF	30 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	02

Per ridurre la sensazione di fischi e ronzii alle orecchie.

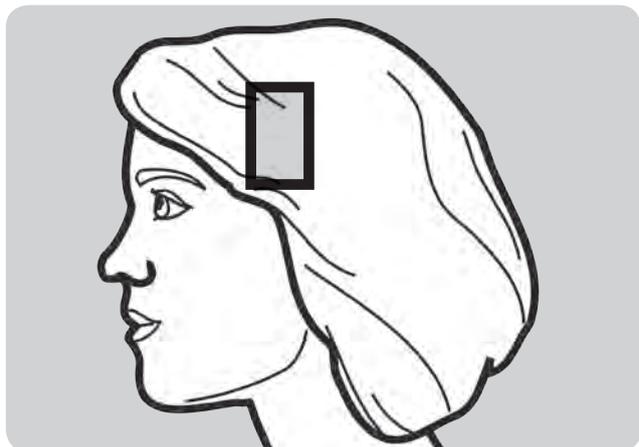


ANTIRUGHE	
INTENSITÀ MAGNETICA LF	20 - 24 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 - 16 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	04

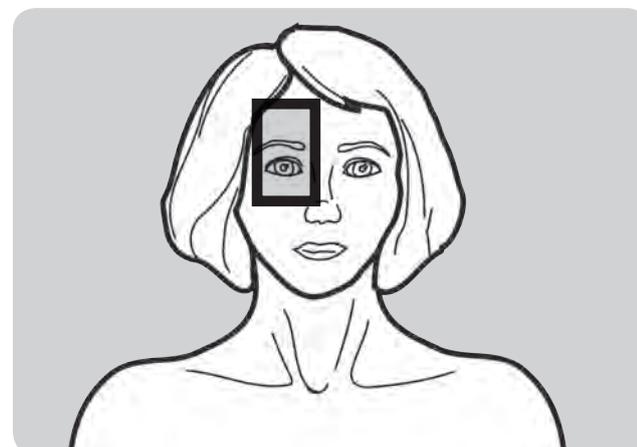

ASMA BRONCHIALE	
INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	63 - 67 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	07


Per ridurre le difficoltà respiratorie con spasmi, congestione e ipersecrezione dei bronchi.

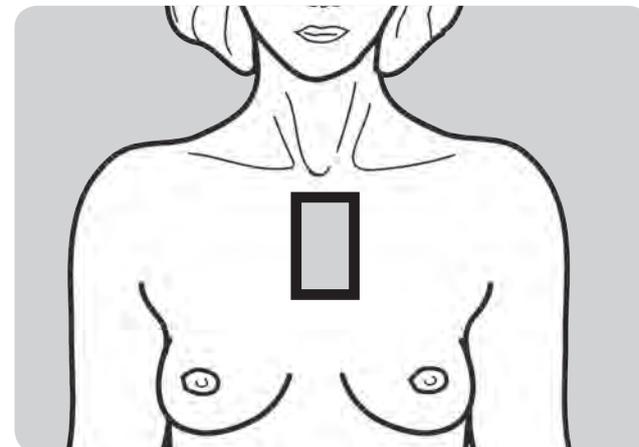

AZIONE ANTI - AGE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	24 - 30 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 - 76 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	10

Per alleviare gli effetti dell'invecchiamento dei tessuti, soprattutto nella zona viso - collo.

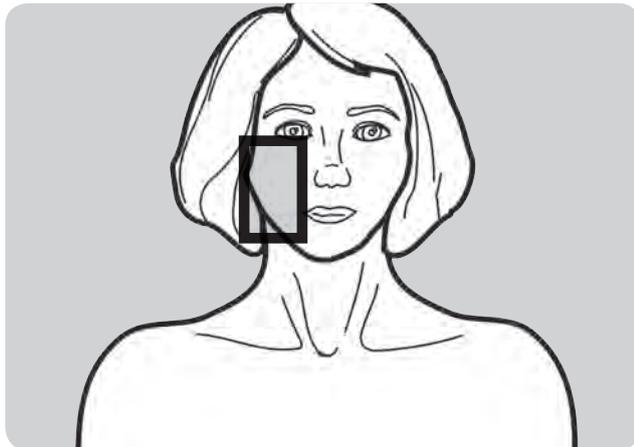

BRONCHITE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	32 - 34 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	14 - 20 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	13

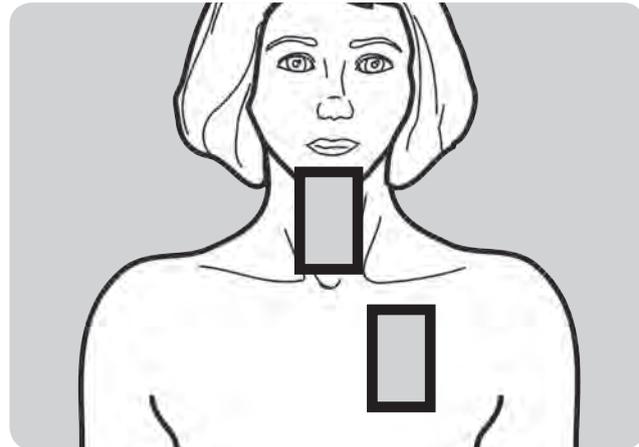

CEFALEA

INTENSITÀ MAGNETICA LF	25 - 33 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	47 - 53 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 2000 HZ
PROGRAMMA	14


Per alleviare il mal di testa, spesso accompagnato da nausea e vomito.

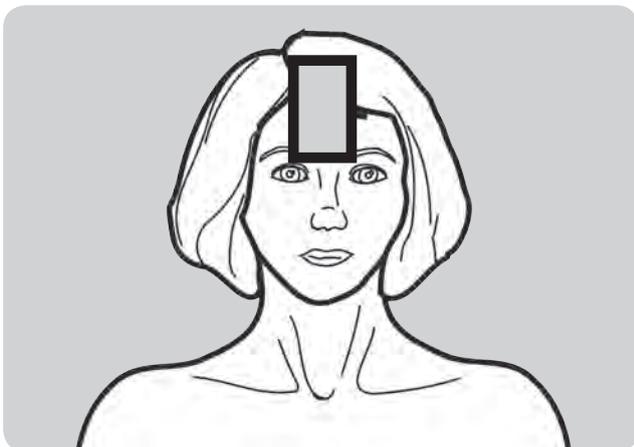

CELLULITE ARTI SUPERIORI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	35 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 28 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	15

Per ridurre l'infiammazione del tessuto connettivo con conseguente deposito eccessivo di adipi.

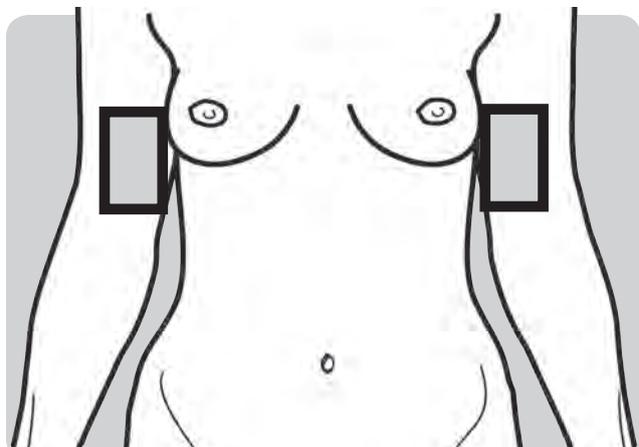


COLITI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	38 - 44 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ
PROGRAMMA	17

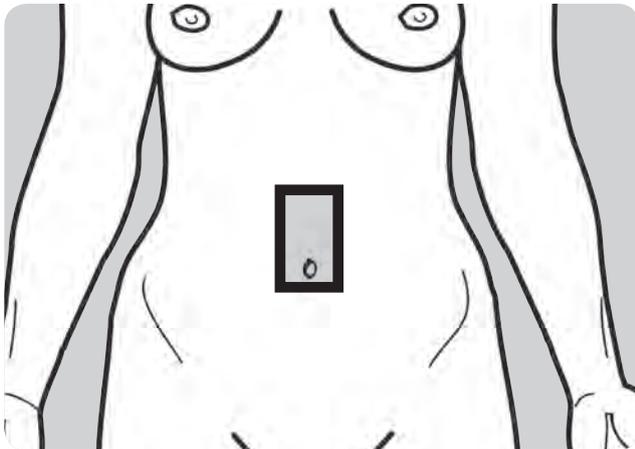


DERMATITI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 - 77 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	19

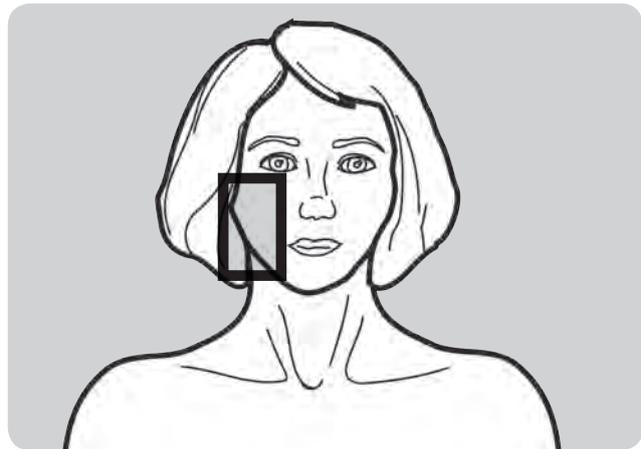


DOLORI MESTRUALI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	22 - 27 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	26

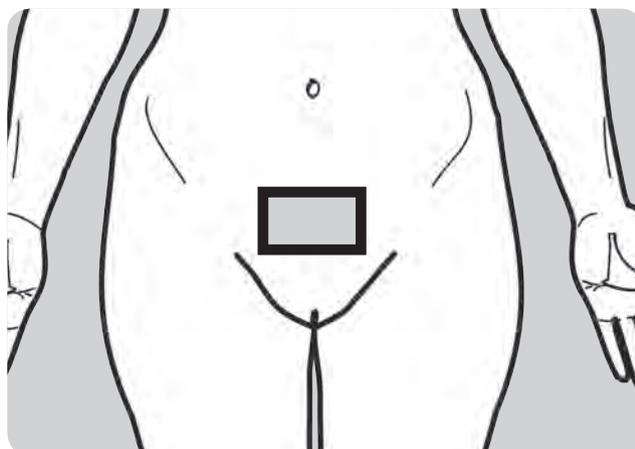

EDEMA POSTFLEBITICO

INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	24 - 30 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	30

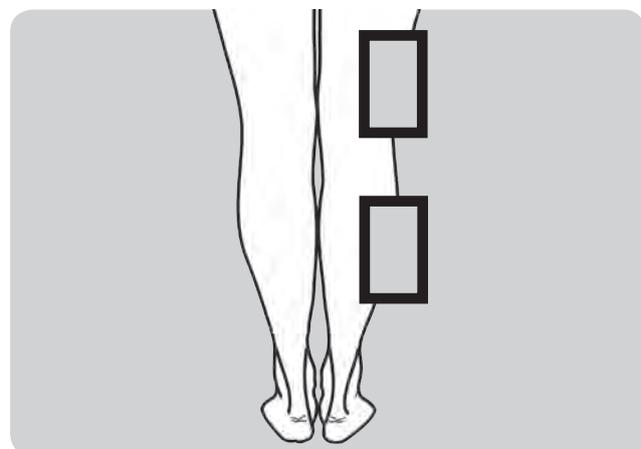


Per diminuire i dolori dovuti a infiammazioni venose localizzate.

IT

EDEMA TIBIALE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	28 - 30 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	31

Per favorire il riassorbimento di edemi nella zona della tibia.

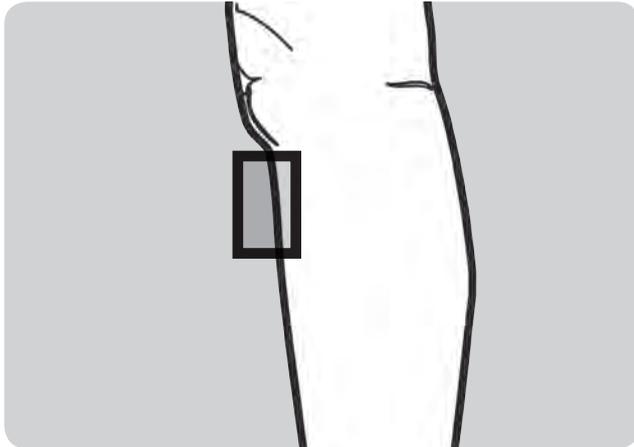

EMATOMI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	30 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	32

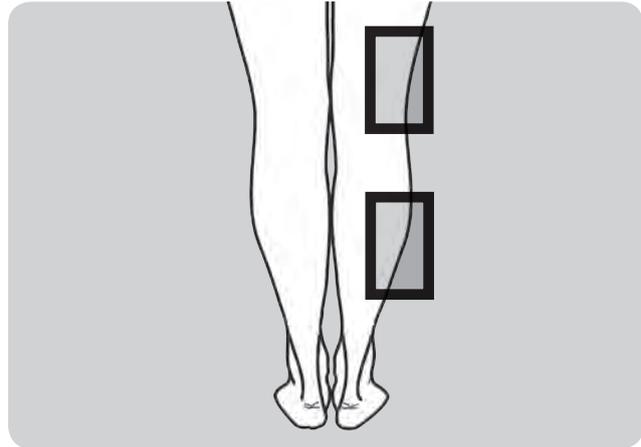

ENFISEMA POLMONARE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	28 - 31 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	33

Per calmare i dolori dovuti alla dilatazione degli alveoli polmonari.

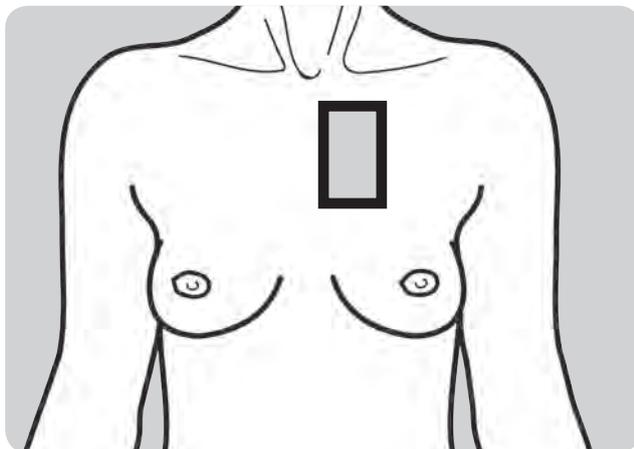

FARINGITE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	25 - 28 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 - 16 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	35

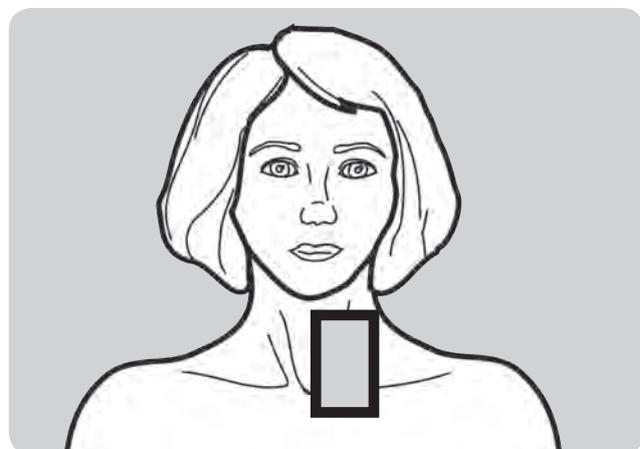

FISTOLE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	18 - 22 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	76 - 83 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	36


Per aiutare a rimarginare le lesioni di origine traumatica o patologica con secrezione di pus.

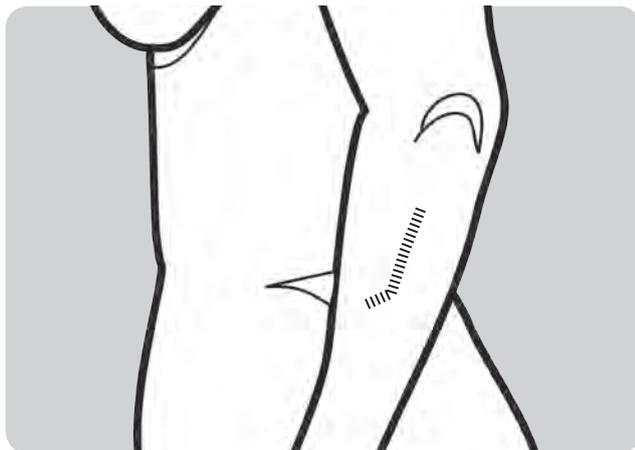

FLEBITI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	28 - 31 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	80 - 88 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	37

Per ridurre il processo infiammatorio acuto o cronico che interessa i vasi venosi.

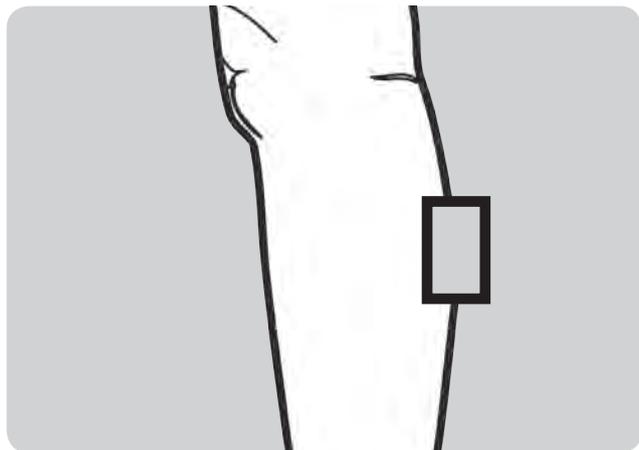

FORMICOLIO


INTENSITÀ MAGNETICA LF	25 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	38 - 43 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	38

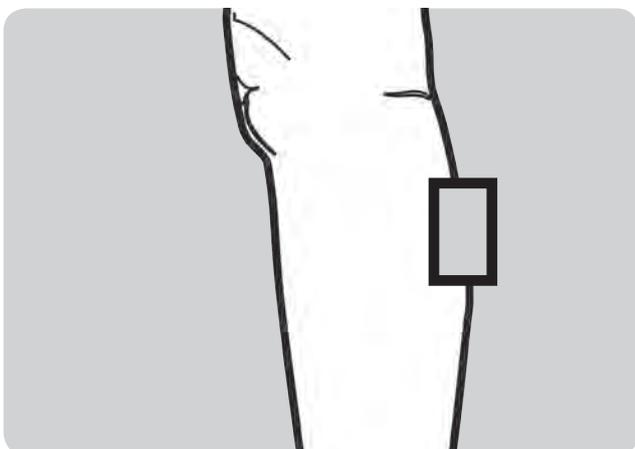

FOTODERMITI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	25 - 28 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 - 76 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	39


Per calmare gli effetti dovuti ad una esagerata sensibilità alla luce solare.

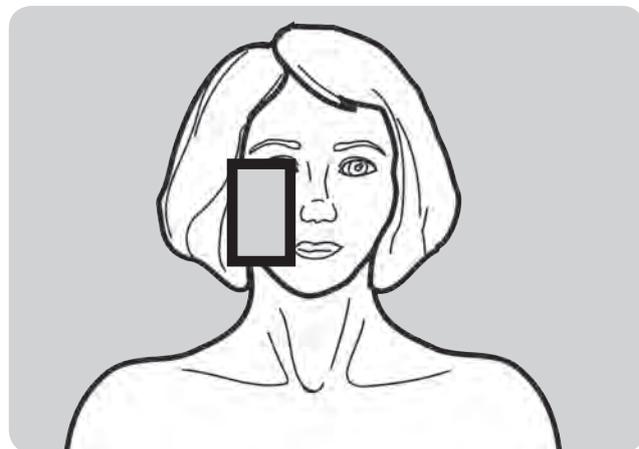

IT


FIBROMIALGIA

INTENSITÀ MAGNETICA LF	30 - 40 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	50 - 100 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	42

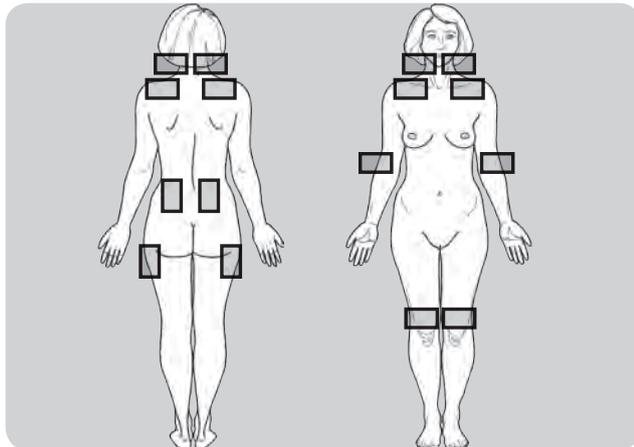

GASTRITI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	50 - 56 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ
PROGRAMMA	43

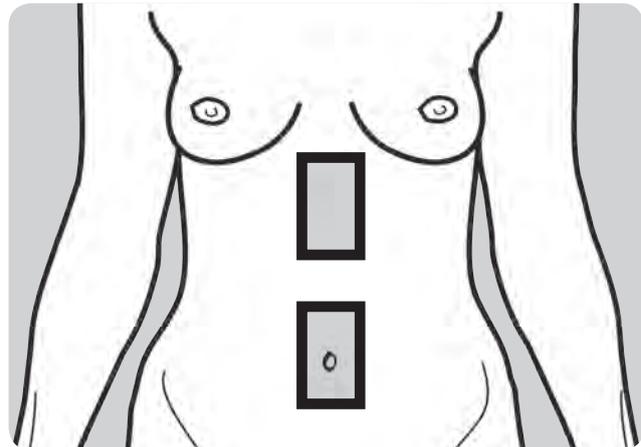

GENGIVITI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	28 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	46 - 53 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	44


Per diminuire le infiammazioni a danno delle gengive.

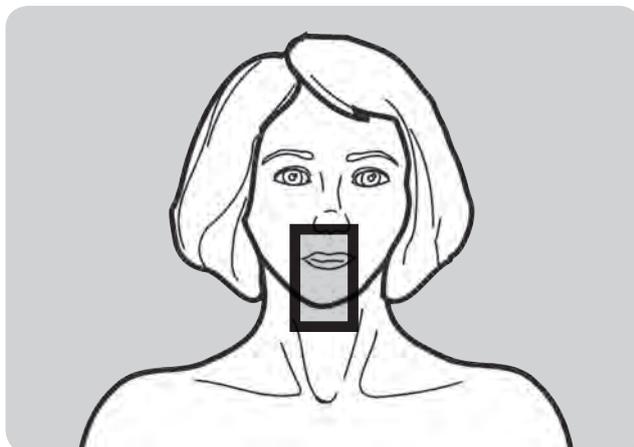

GONARTROSI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	50 - 56 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	1000 - 5000 HZ
PROGRAMMA	45

Per calmare i dolori dovuti ad artrosi del ginocchio.

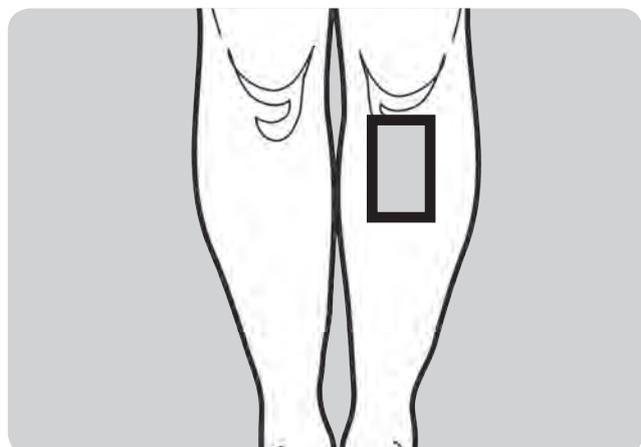


HERPES SIMPLEX

INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	24 - 30 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 3000 HZ
PROGRAMMA	47

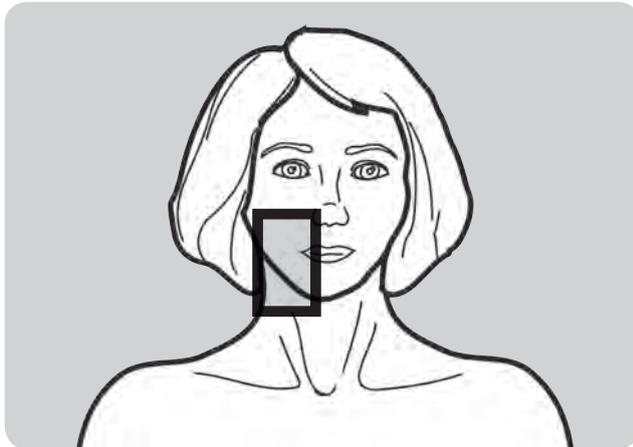


HERPES ZOSTER (FUOCO DI SANT'ANTONIO)

INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 44 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	24 - 30 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 3000 HZ
PROGRAMMA	48

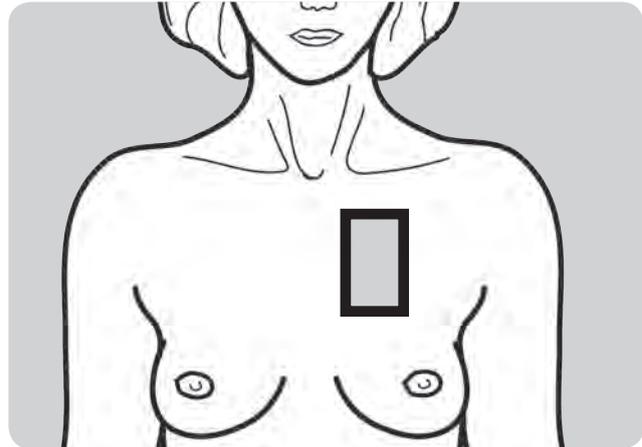


IMPOTENZA

INTENSITÀ MAGNETICA LF	28 - 30 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ
PROGRAMMA	49

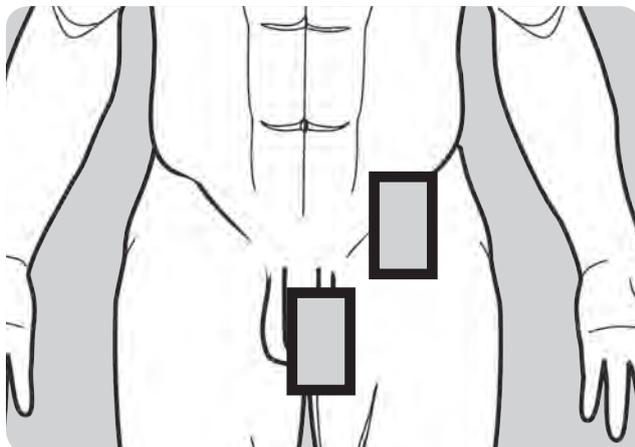

IPOTENSIONE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	20 - 27 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	50 - 56 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ
PROGRAMMA	50

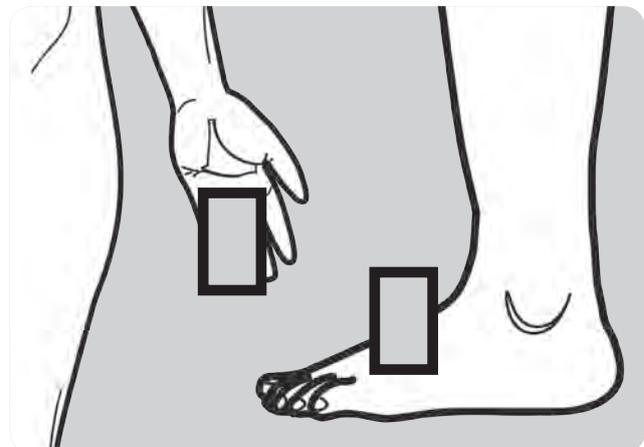


Per contrastare la riduzione del sangue arterioso nel circolo causa di piedi e mani fredde.

IT

LACERAZIONE PELLE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	22 - 27 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	38 - 42 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	52

Per aiutare a rigenerare la cute sui tagli senza lasciare cicatrici.

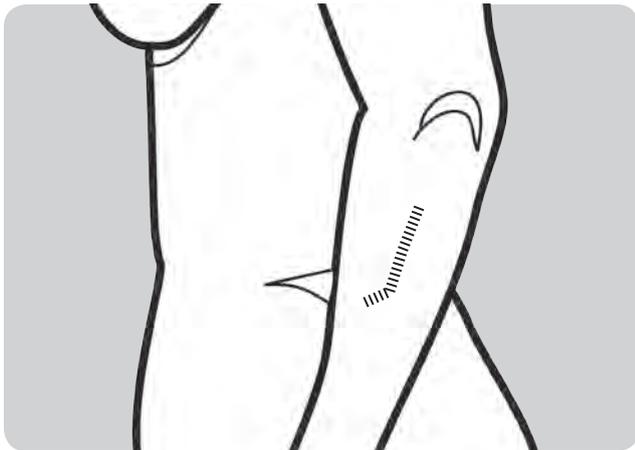

LARINGITE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	15 - 18 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 - 16 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	53

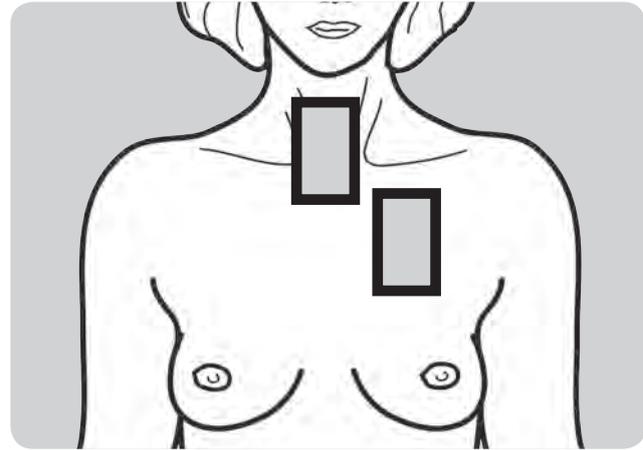

LINFANGITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	20 - 25 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	54


Per mitigare i dolori dovuti ad infiammazione dei vasi linfatici.

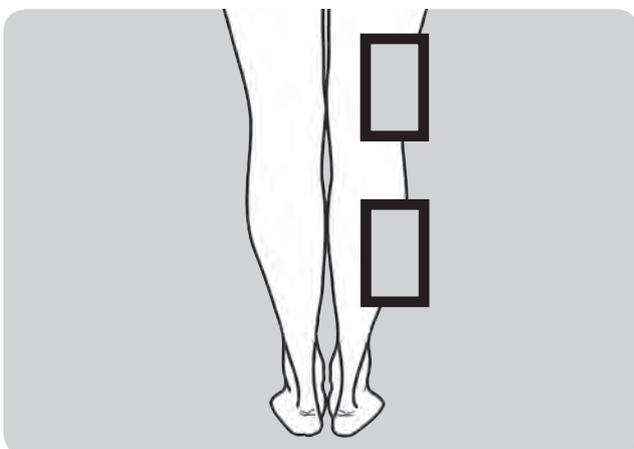

LINFEDEMA

INTENSITÀ MAGNETICA LF	18 - 23 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	55


Per alleviare i dolori dovuti ad accumulo di linfa nei vasi linfatici.

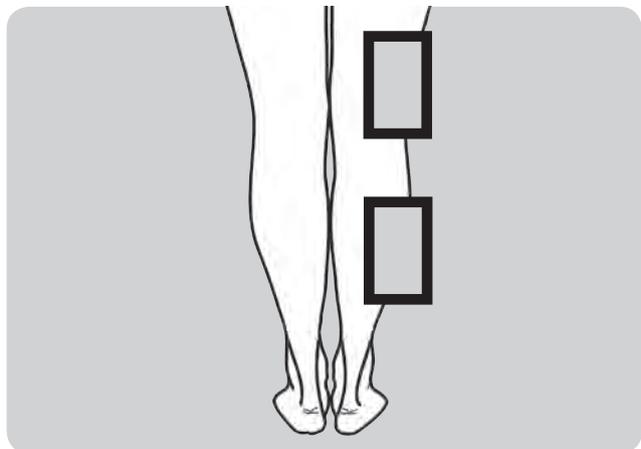

LINFEDEMA POSTMASTECTOMIA

INTENSITÀ MAGNETICA LF	22 - 28 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	56


Per mitigare i problemi dovuti all'intervento di mastectomia riguardanti la scarsa irradiazione degli arti superiori.

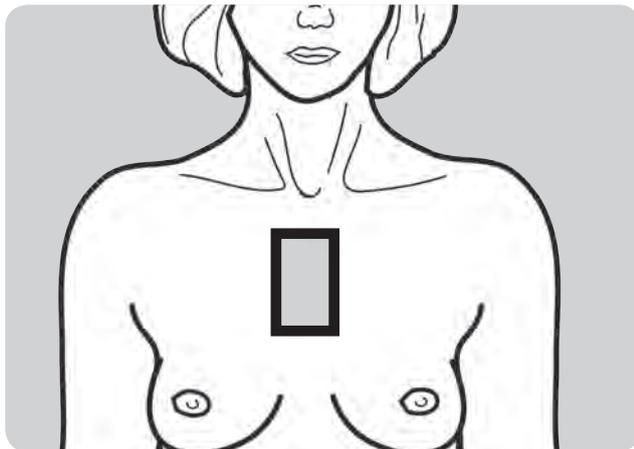

LOMBOSCIALGIA

INTENSITÀ MAGNETICA LF	36 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	40 - 46 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	1000 - 10000 HZ
PROGRAMMA	57

Per alleviare i dolori che si irradiano dalla zona lombare e proseguono lungo il nervo sciatico.

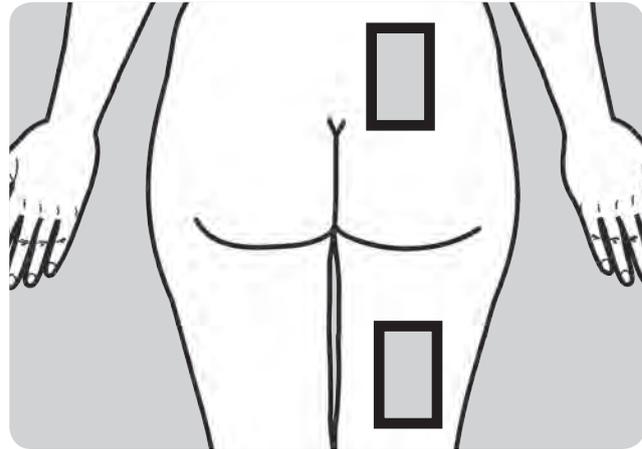

MORBO DI RAYNAUD

INTENSITÀ MAGNETICA LF	13 - 16 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	24 - 30 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	60


Per alleviare i dolori dovuti a difetti circolatori localizzati soprattutto alle dita della mano.



NEURALGIA AL COCCIGE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	46 - 52 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	76 - 83 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 3000 HZ
PROGRAMMA	61

Per mitigare i dolori dovuti nella zona del coccige.

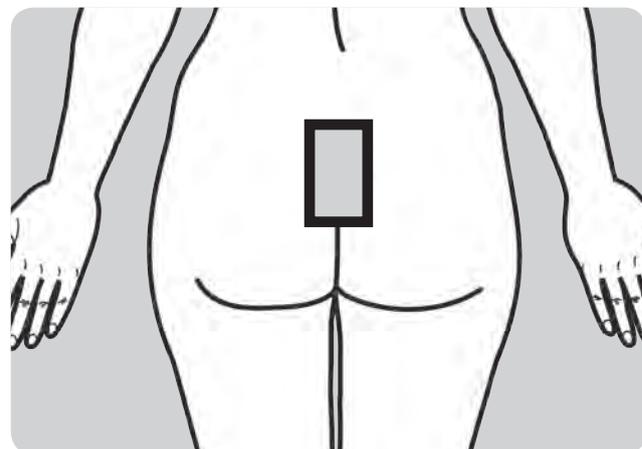


IT

NEURALGIE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	37 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	77 - 82 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 3000 HZ
PROGRAMMA	62


Per alleviare un dolore acuto causato dall'irritazione dei nervi trigemino, sciatico, eccetera.

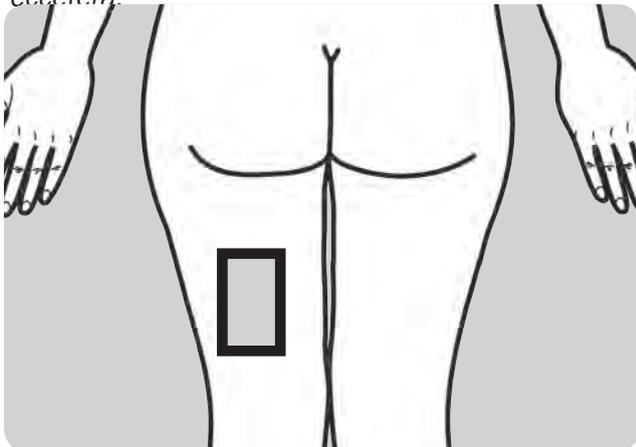

NEVRITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	24 - 30 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	63


Per calmare l'infiammazione dei nervi in particolari distretti corporei.

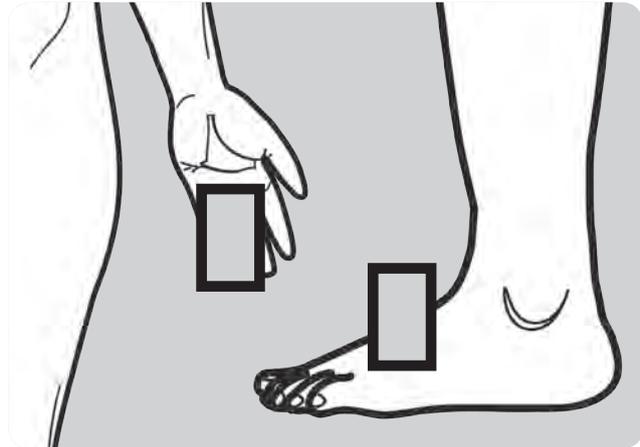

OTITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	17 - 24 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	52 - 57 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	65


Per calmare le infiammazioni dell'orecchio medio e di quello esterno.

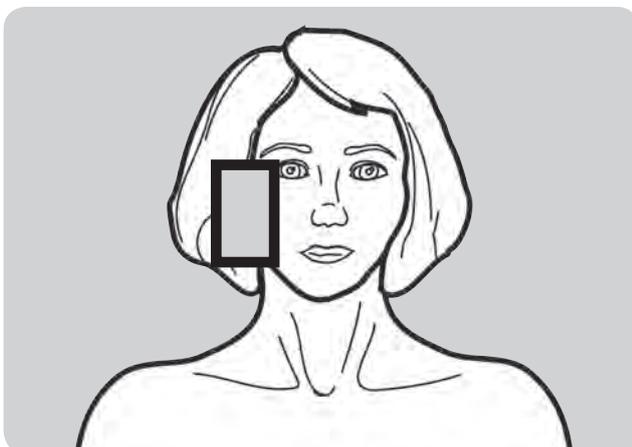

PERIARTRITE SC APOLOMERALE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	35 - 41 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 - 16 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	1000 - 10000 HZ
PROGRAMMA	66


Per calmare i dolori dovuti ad infiammazione dei muscoli e tendini dell'omero.

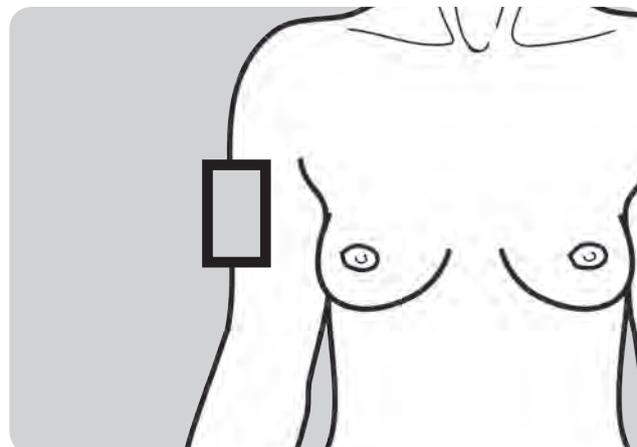

PIAGHE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	20 - 26 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	61 - 67 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	67


Per aiutare a rimarginare le ustioni e le lesioni profonde della cute senza lasciare cicatrici.

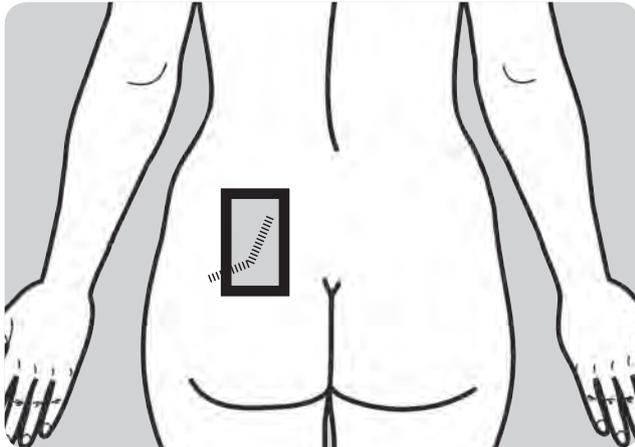

POLIARTRITE REUMATOIDE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	37 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 - 76 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	1000 - 10000 HZ
PROGRAMMA	68

Per calmare i dolori dovuti ad infiammazione cronica e contemporanea di più articolazioni.

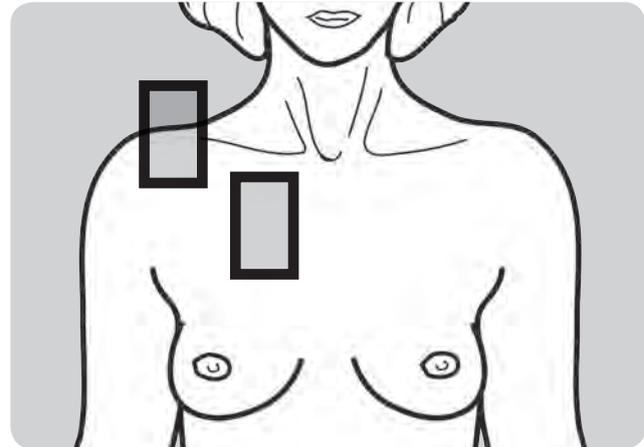

POSTUMI D A RASCHIAMENTO

INTENSITÀ MAGNETICA LF	35 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ
PROGRAMMA	69

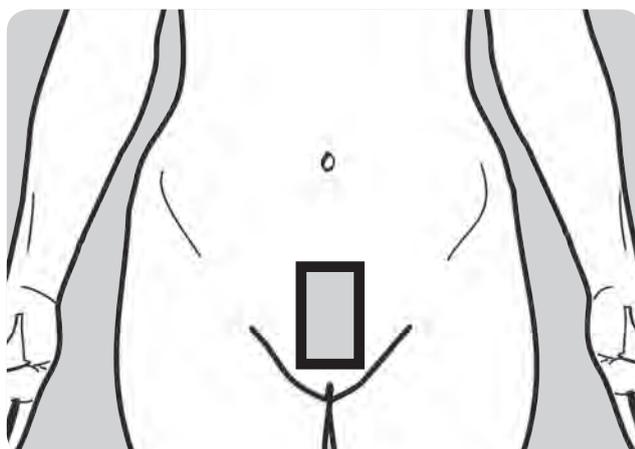

PROGRAMMA UNIVERSALE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	20 - 50 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 80 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	70


*Per trattare patologie non comprese negli altri programmi. Meno specifico e più generico, copre l'intero spettro di frequenze e potenze disponibili sulla macchina. **Il trattamento si interrompe con lo spegnimento dell'apparecchio.***

IT

PROSTATITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	18 - 22 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	71


Per diminuire i dolori dovuti all'infiammazione della ghiandola prostatica.

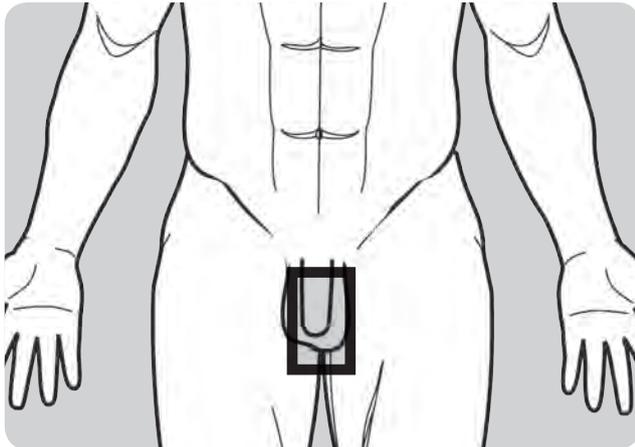

PROSTATOCISTITE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	38 - 44 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	72

Per alleviare i dolori dovuti all'infiammazione della ghiandola prostatica.

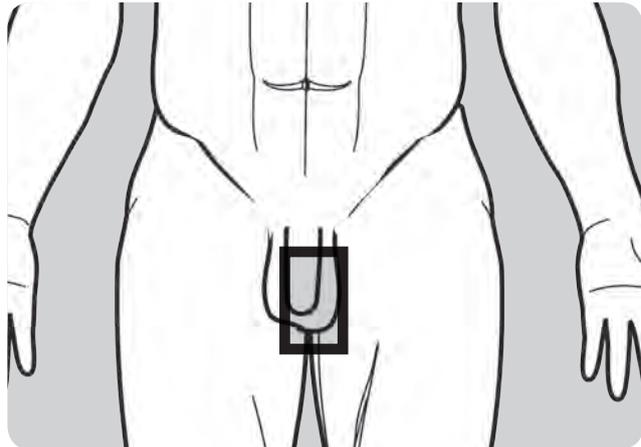

PSORIASI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	23 - 29 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	70 - 76 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	73

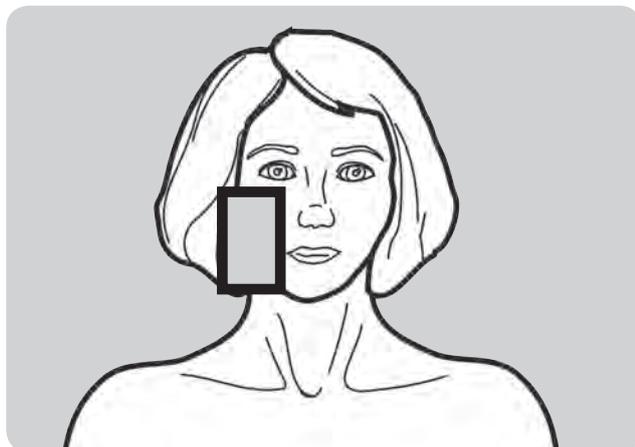

RIGENERAZIONE TESSUTI CUT ANEI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	77 - 84 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	75


Per aiutare a ricostruire il tessuto lesa favorendo un'azione antibatterica.

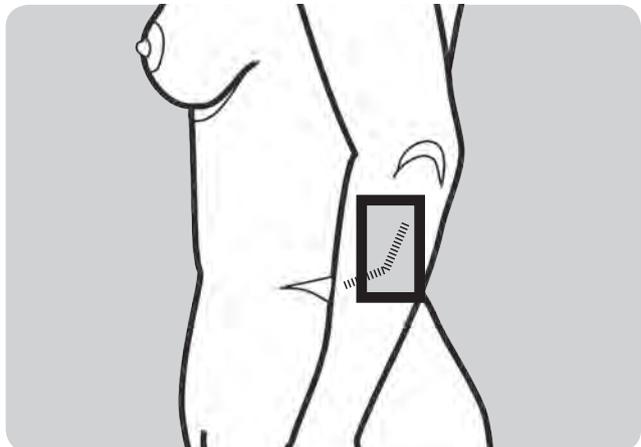

RINITI


INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 34 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 - 16 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	76

Per calmare il processo infiammatorio della mucosa nasale anche se di tipo allergico.

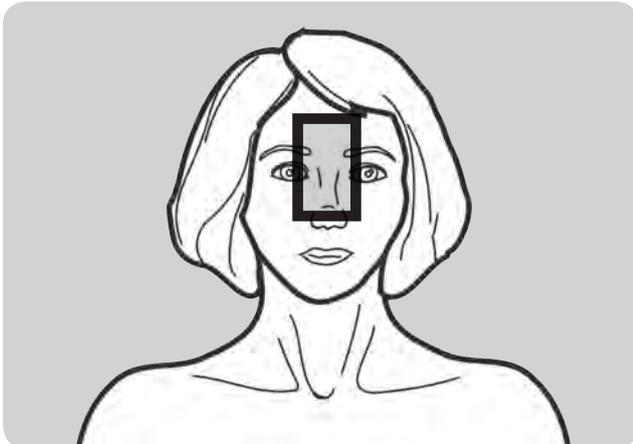


SINUSITI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	46 - 52 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	10 - 16 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	79

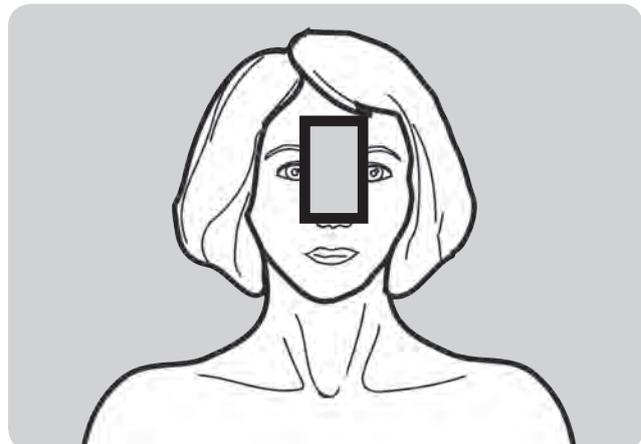

SMAGLIATURE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	30 - 38 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	44 - 52 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	80

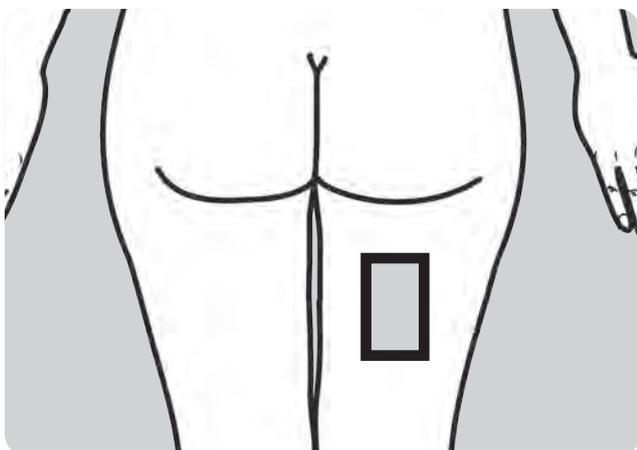

TONSILLITI

INTENSITÀ MAGNETICA LF	18 - 26 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	12 - 15 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	85

Per placare le infiammazioni acute a carico delle tonsille palatine.

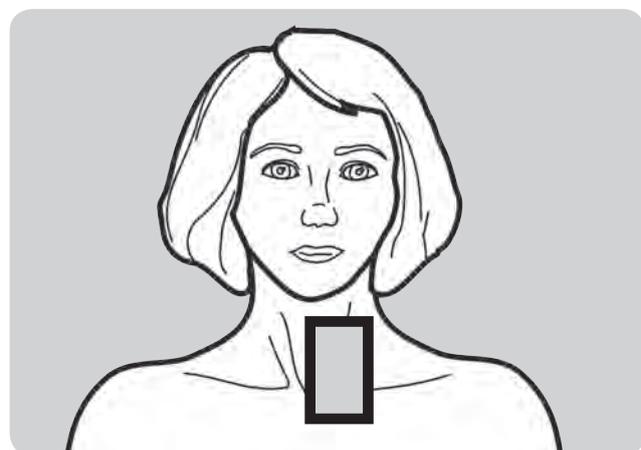


IT

TRACHEOBRONCHITE


INTENSITÀ MAGNETICA LF	32 - 34 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	87

Per placare i dolori dovuti ad infiammazione della trachea e dei bronchi.

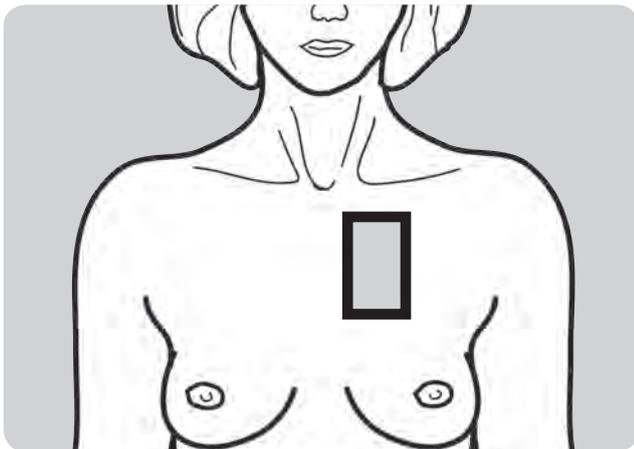

TRAUMA ORECCHIO


INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ
PROGRAMMA	88

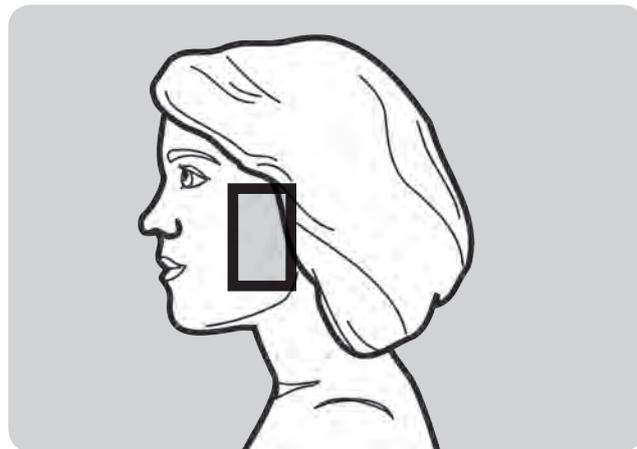

ULCERA DA DECUBITO


INTENSITÀ MAGNETICA LF	46 - 52 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	76 - 83 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	89

Per calmare i dolori causati dalle ulcerazioni dovute da una prolungata permanenza a letto.

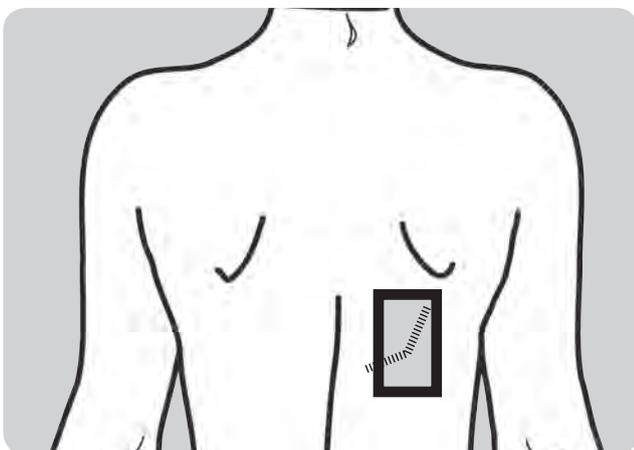

ULCERA DUODENALE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ
PROGRAMMA	90

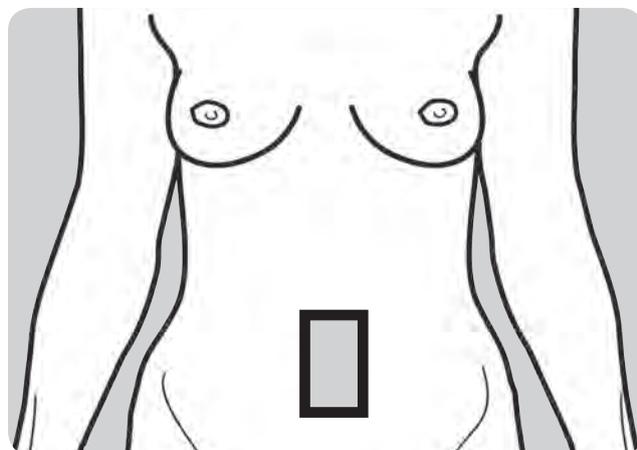



ULCERA GASTRICA

INTENSITÀ MAGNETICA LF	26 - 30 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 1000 HZ
PROGRAMMA	91

VENE VARICOSE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	18 - 27 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	42 - 48 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 5000 HZ
PROGRAMMA	92

Per ridurre la dilatazione delle vene e dei vasi linfatici.

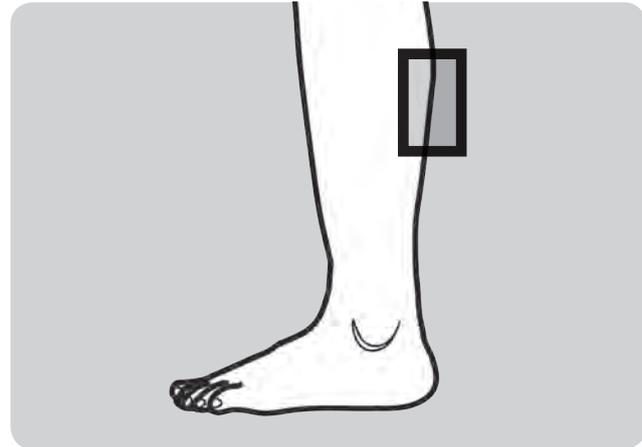
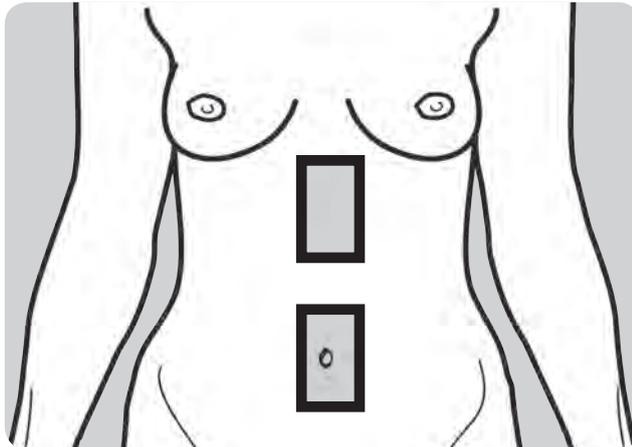


CELLULITE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	35 - 42 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 28 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	93

LIPORIDUCENTE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	40 - 50 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 40 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	94

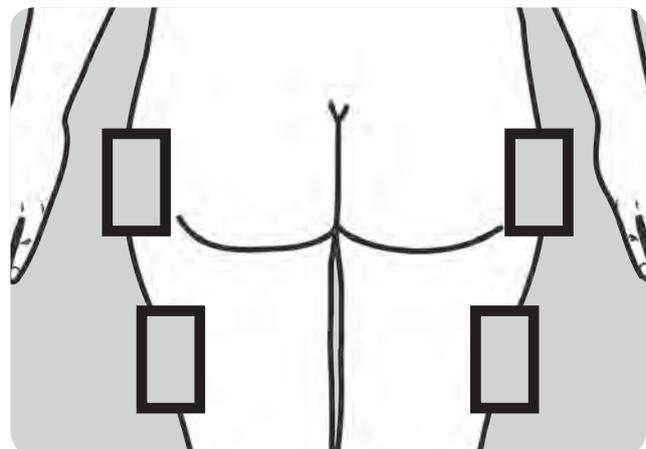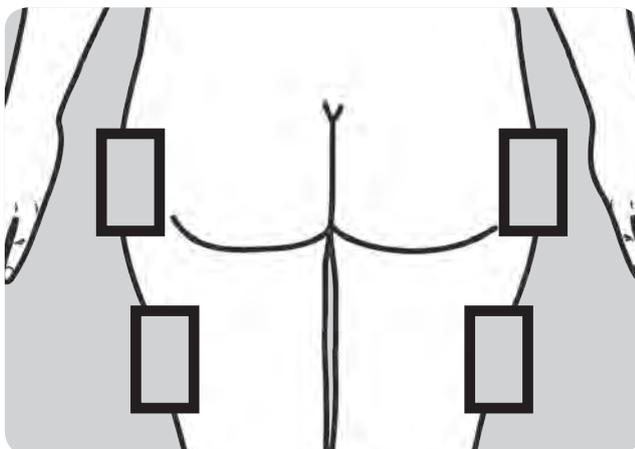



IT


LINFODRENAGGIO

INTENSITÀ MAGNETICA LF	30 - 32 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 26 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	95

TONIFICANTE

INTENSITÀ MAGNETICA LF	25 - 44 G
FREQUENZA MAGNETICA LF	20 - 40 HZ
FREQUENZA MAGNETICA HF	500 - 10000 HZ
PROGRAMMA	96

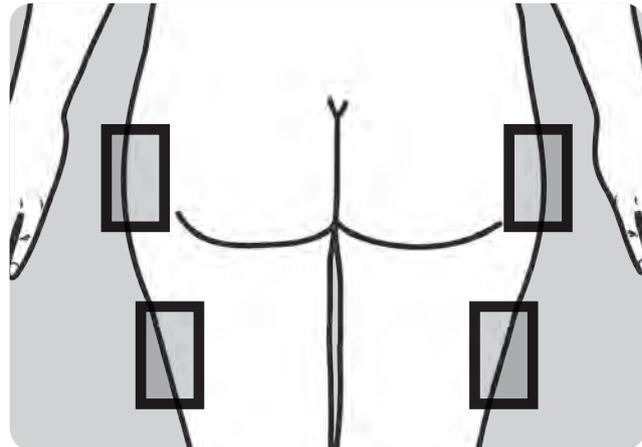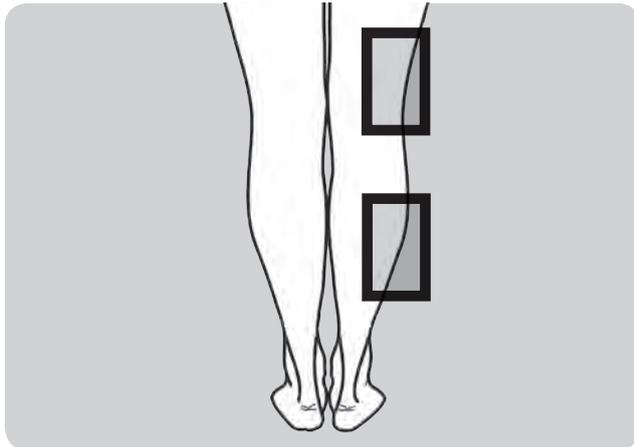

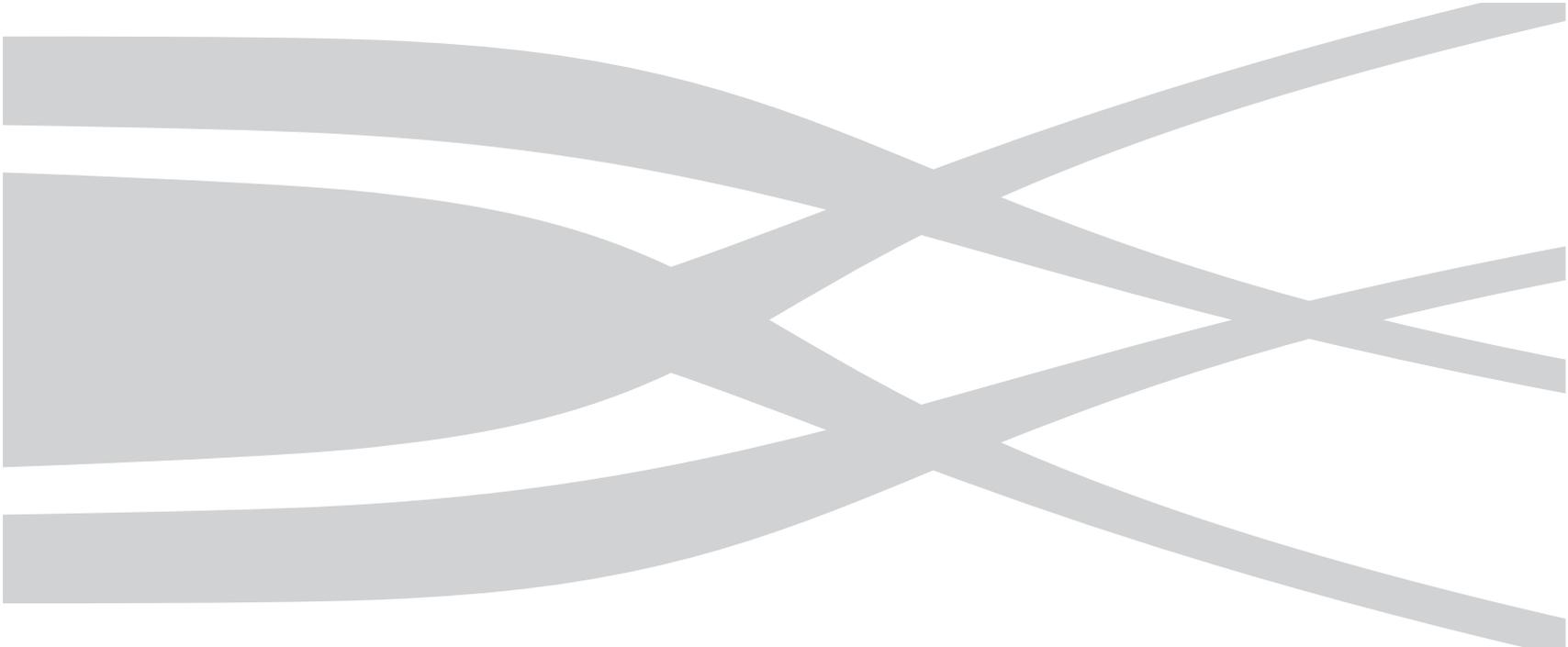

HSD

Stampato in Italia